



1. Do NOT remove the cover. It may cause electric short circuit.
It is recommended to have the product always cleaned by qualified personnel.
2. Replenished only with the flow of the same type and same
specification.
3. Throw the user's manual carefully before use.
4. Do NOT open the access. The company will not be responsible for
repair and replacement after it had been opened.

Matras Anti Decubitus KMN 303

Untuk pencegahan dan perawatan Ulkus (Luka), rongga udara yang terdapat pada matras. Matras terapi dengan gelembung udara yang rendah memberikan kelegaan tekanan dan kenyamanan tidur.

- Sel udara mengembang & mengempis dalam siklus bergantian untuk memberikan bantuan tekanan.
- Fitur pengaturan kenyamanan difungsikan untuk tingkat kenyamanan yang berbeda agar sesuai dengan berat badan pasien.
- Mikro low air loss (ventilasi udara) memberikan permukaan tidur yang lebih bersih dan nyaman.
- Pengait unit daya dapat dipasang dengan mudah hampir ke semua rangka tempat tidur.
- Sudut-sudut yang membulat dirancang untuk keamanan.




Diproduksi oleh :
PT. Karya Medis Nusantara

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1 No. 6, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.


Telp : (021) 59587711

Email : karyamedisnusantara@gmail.com

Unit daya memiliki tingkat kenyamanan yang dapat disesuaikan dengan berat badan masing-masing pasien.

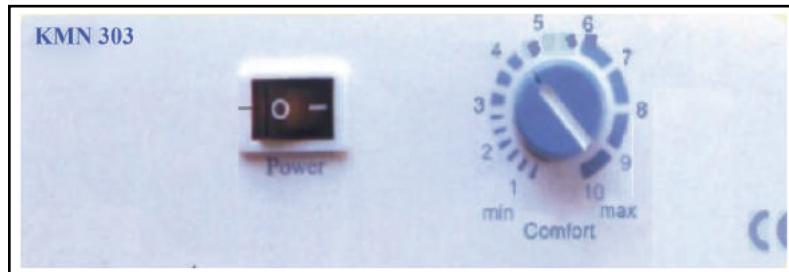

- Saklar daya
- Saklar daya menyala saat sedang beroperasi
- Knob pengatur kenyamanan.

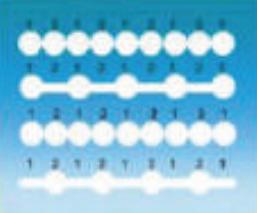	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak berisik, tahan lama, dan mempunyai performa tinggi. ▪ Pengait mudah dipasangkan hampir ke semua rangka tempat tidur.
	<p>Sel udara mengembang dan mengempis dalam siklus bolak-balik memberikan bantuan tekanan untuk jaringan sensitif pasien.</p>
	<p>Micro low air loss: Sel-sel udara berventilasi udara dari rongga kantong matras yang memberikan kenyamanan tidur dan mengatur temperatur pasien.</p>

Data Teknis :

Unit Daya

Dimensi	: 26 cm x 22 cm x 9 cm
Berat	: 2 kgs (kira-kira)
AC Input	: 100-120V/50Hz or 200-240 V/ 50 Hz
Current	: 0.3 A
Suhu pengoperasian	: 5-45 °C
Suhu penyimpanan	: 5-45 °C
Suhu pengiriman	: 5 – 45 °C



Diproduksi oleh :

PT. Karya Medis Nusantara

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1 No. 6, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

Telp : (021) 59587711

Email : karyamedisnusantara@gmail.com